



1. Naam van het product

Nenko Interactive - Dieptespiegel paneel

2. Code van het product

29010085


3. Korte omschrijving

Laat dit fonkelende paneel je passief verbazen met tal van effecten en regenboogkleuren en regel intensiteit, volume, snelheid simpel naar smaak. Gebruik het paneel actief middels de gebruikersknoppen zoals de play/pauze knop om bijvoorbeeld het patroon van een bepaalde kleur te stoppen (actie-reactie, kleurherkenning, visueel volgen). Of gebruik de richtingsknop om de begeleider/gebruiker in staat te stellen patronen in de richting van de klok of tegen de klok in te selecteren om zo L-R volgoefeningen te kunnen doen. Druk op de patroonknop om een reeks betoverende schijnbaar oneindige patronen te zien/ Geluidseffecten begeleiden elk patroon waarmee dit paneel zowel visuele als auditieve sensorische stimulatie biedt. Paneel is Nenko Interactive compatibel en reageert dus ook op controllers als microfoon, 6-knoppen schakelaar, kubus en het Nenko Sense Systeem. Wordt geleverd inclusief muurbeugel met instructies. Inclusief fixatiesysteem voor op het paneel. De fixatieschroeven voor in de muur zijn niet inbegrepen. Afmeting: 50 x 90 x 10 cm

5. Zintuigen stimulaties

Zien, horen en voelen

6. Installatie

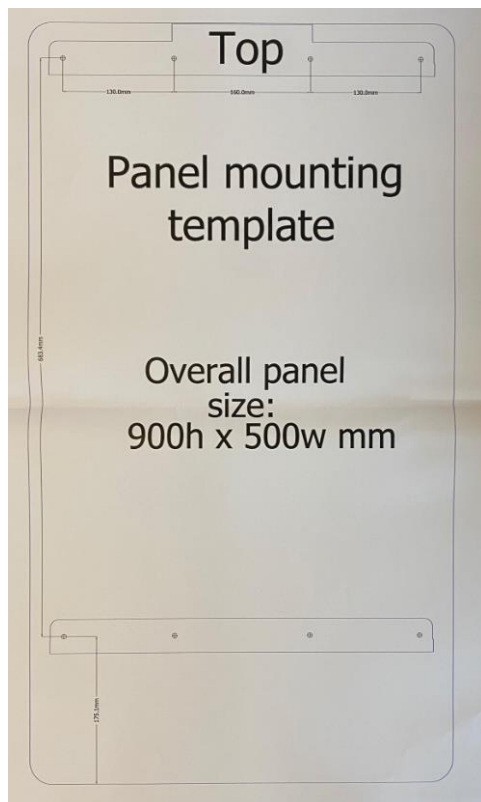

Je kunt dit op de achterwand plaatsen en dan de schroeven boren op de aangewezen plekken.




7. In gebruik nemen

Het paneel is direct klaar voor gebruik:

Sluit het paneel eenvoudig aan op het stopcontact en schakel de stroom in.

Om het paneel in te schakelen, drukt u op de aan / uit knop:

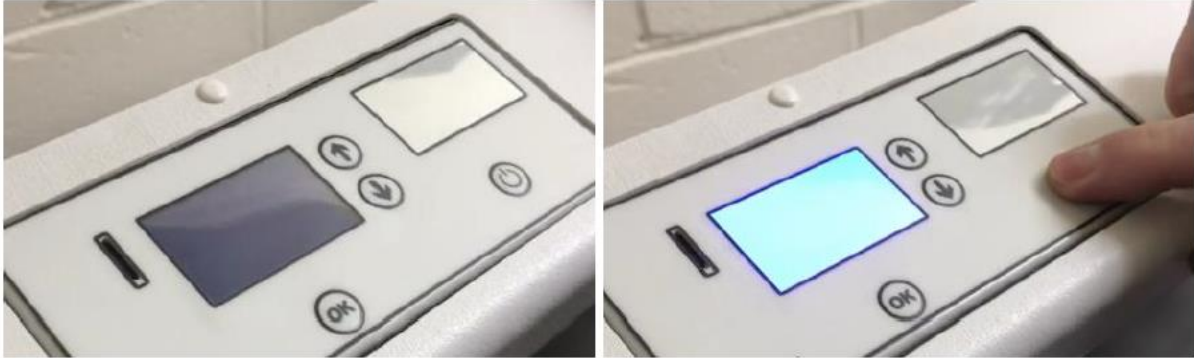

Het LCD- scherm licht op en geeft een vergrendelend symbool weer. Het paneel start in de laatst gebruikte modus. Om het paneel te ontgrendelen, houd 3 seconden de pijltoetsen omhoog en omlaag ingedrukt:



Het menu is nu toegankelijk.

Instellingen zijn als volgt:

- Volume
- Helderheid
- Snelheid
- Microfoongevoeligheid
- Draadloze connectie
- Koppelen

Gebruik de pijlknoppen om de instelling te selecteren die u wilt wijzigen, bijv. beginnend vanaf het volumescherm, druk omlaag om de helderheidsinstellingen te bereiken en nogmaals omlaag om toegang te krijgen tot snelheidsinstellingen, enzovoort.






Volume

Selecteer het volume in het menu en druk op OK om het volume te wijzigen:

Het volume kan vervolgens worden gewijzigd met de pijltoetsen omhoog en omlaag. Selecteer het gewenste volumeniveau en druk vervolgens opnieuw op OK om deze instelling op te slaan.

Helderheid


Om de helderheid te wijzigen, selecteer helderheid in het menu en druk vervolgens op OK:

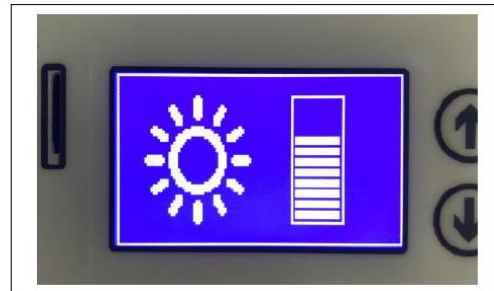

De helderheid kan vervolgens worden gewijzigd met de pijltoetsen omhoog en omlaag. Selecteer het gewenste helderheidsniveau en druk vervolgens opnieuw op OK om deze instelling op te slaan.

Snelheid


Om de snelheid te wijzigen, selecteert u snelheid in het menu en drukt u vervolgens op OK:

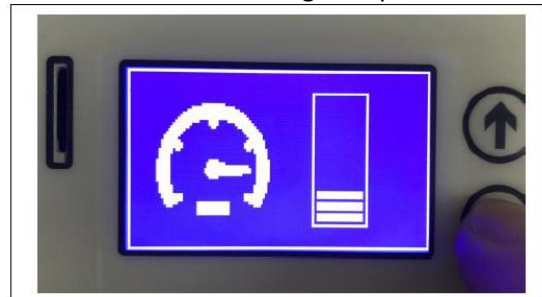

De snelheid kan vervolgens worden gewijzigd met de pijltoetsen omhoog en omlaag. Selecteer het gewenste snelheidsniveau en druk vervolgens opnieuw op OK om deze instelling op te slaan. Het paneel reageert sneller op geluiden wanneer de snelheidsinstelling hoger is. Snelheid wordt per patroon opgeslagen, waardoor individuele vereisten mogelijk zijn.

Gevoeligheid microfoon

Om de gevoeligheid van de microfoon te wijzigen, dit kan in het menu en klikt u daarna op OK :

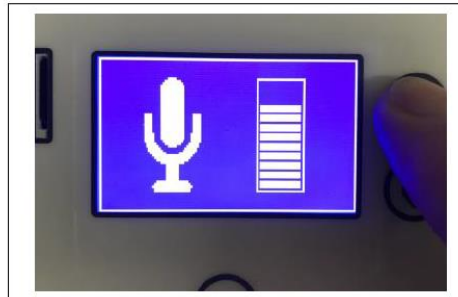

De gevoeligheid kan dan worden gewijzigd met de pijltoetsen omhoog en omlaag. Selecteer het gewenste gevoeligheidsniveau en druk nogmaals op OK om deze instelling op te slaan. Zet bij gebruik in ruimtes met veel achtergrondgeluid het gevoeligheidsniveau op een lagere stand. Het gevoeligheidsniveau wordt per model opgeslagen, zodat aan individuele eisen kan worden voldaan.

Modus


Als u de modus wilt wijzigen, selecteert u deze in het menu en drukt u op OK:



De modus kan vervolgens worden gewijzigd met behulp van de pijl-omhoog en pijl-omlaag knoppen. Selecteer de gewenste modus en druk nogmaals op OK om deze instelling op te slaan.

Draadloze connectiviteit

Draadloze connectiviteit kan worden aangepast met behulp van deze instelling. Connectiviteit kan worden gedraaid aan of uit:

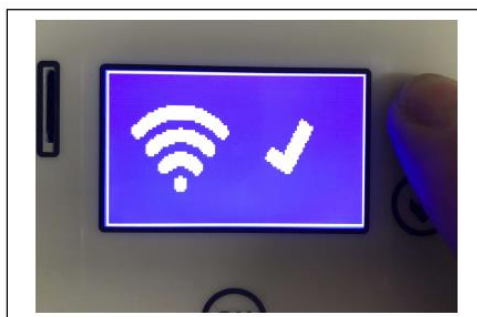

Wanneer connectiviteit is ingeschakeld, reageert het paneel op andere interactieve producten in de ruimte, zoals een schakelpaneel of een interactieve soft play kubus.

Schakel connectiviteit in of uit met de pijlknoppen omhoog en omlaag. Selecteer de gewenste



en druk nogmaals op OK om deze instelling op te slaan.

Koppeling

Er zijn 5 koppelingskanalen. Kanaal 0 is de standaard fabrieksinstelling. Wanneer de paneel is ingesteld op kanaal 0, alle compatibele interactieve schakelaars in de kamer werken op het paneel, bijv. het schakelpaneel, de interactieve softplay kubus.

Selecteer het gewenste koppelingskanaal met de pijlknoppen omhoog en omlaag. Selecteer de gewenste instelling en druk nogmaals op OK om deze instelling op te slaan.

Kanaal 1 is de groene knop (12 uur) op het schakelpaneel

Kanaal 2 is de blauwe knop

Kanaal 3 is de oranje knop

Kanaal 4 is de paarse knop

Kanaal 5 is de gele knop

Voorbeeld:

Als u het paneel wilt koppelen met de groene knop op het schakelpaneel, selecteert u Kanaal 1 op de knop paneel. Houd vervolgens de koppelingsknop op het schakelpaneel ingedrukt en druk vervolgens op de groene knop. Laat nu de koppelingsknop los. Het schakelpaneel bedient nu het paneel op Kanaal 1.

Gebruik dezelfde procedure om het paneel te koppelen met de blauwe knop op de ovaal afstandsbediening: hiervoor moet Kanaal 2 op het paneel worden geselecteerd, enzovoort

Als u het schakelpaneel terug wilt zetten naar Kanaal 0, houdt u de koppeling ingedrukt



aan de zijkant van het schakelpaneel en druk vervolgens op de middelste knop voordat u deze beide knoppen los laat.

Kanaal 0: Fabrieksinstellingen


Kanaal 1: Groen op ovale afstandsbediening

Met deze functie kunt u 1: 1 gebruik maken van een paneel en het schakelpaneel terwijl anderen genieten apparatuur in de kamer.



Dieptespiegel paneel knoppen

Het Dieptespiegel paneel heeft 4 robuuste knoppen aan de basis voor gemakkelijke toegang:

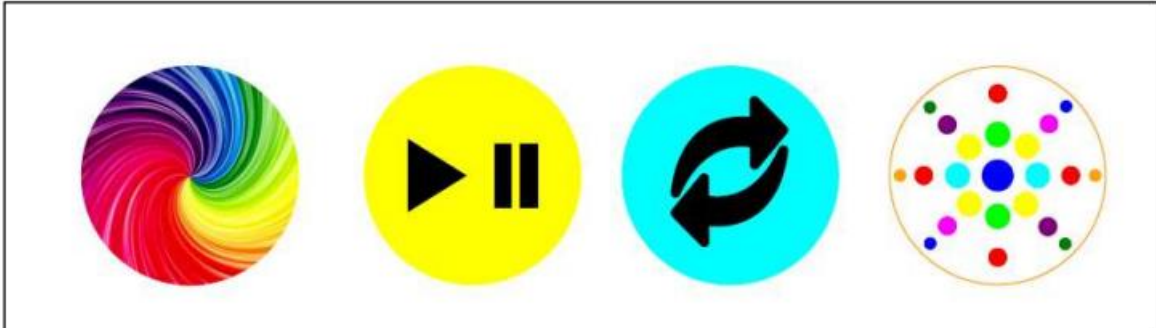

Het paneel wordt compleet geleverd met een micro SD-kaart met 14 muziektracks. Gebruikers kunnen deze micro SD-kaart vervangen door een andere om aan hun eigen persoonlijke voorkeuren te voldoen, waardoor dit een echt veelzijdig paneel is. Zie de opmerkingen op de meegeleverde micro SD-kaart voor aanwijzingen voor het wijzigen van de muziektracks.

Vanaf L-R:

Kleurverandering verandert de kleur van de LED-lampjes – 8 kleuren: groen, blauw, donkerblauw, paars, roze, rood, oranje, geel.

Afspelen/Pauze het huidige patroon afspelen of onderbreken
Richting de rotatie/oriëntatie van het patroon wijzigen
Patroon verander het patroon.

Modi

Het dieptespiegel paneel bestaat uit verschillende gekleurde patroonmodi, elk het bieden van visuele stimulatie en het aanleren van oorzaak en gevolg.

Modus 1: Patronen met geluiden – één kleur

- Patroon 1: Infinity tunnel
- Patroon 2: Brede horizontale staven die naar boven/naar beneden of van links naar rechts reizen
- Patroon 3: Brede horizontale staven die in een cirkel reizen
- Patroon 4: Blok vervagende kleur dat in een cirkel reist
- Patroon 5: Spiraal van kleur vult geleidelijk de cirkel
- Patroon 6: Kleur verspreidt zich langzaam omhoog/omlaag langs de zijkant
- Patroon 7: Middelgrote horizontale staven die naar boven/naar beneden of van links naar rechts reizen
- Patroon 8: Twee dunne horizontale scheuten die in een cirkel reizen
- Patroon 9: Vier dunne horizontale scheuten die in een cirkel reizen en kruisen
- Patroon 10: Banden van kleurvulling vanaf het midden van de zijkanten en naar buiten

Modus 2: Patronen met geluiden - veelkleurig

De dieptespiegel paneel patronen zijn veelkleurig in deze modus. Gebruik de kleur verander de knop om de weergegeven kleuren te wijzigen.





Modus 3: Patronen met geluiden – één kleur regenboog autocycle

In deze modus fietst het paneel automatisch door een regenboog van kleuren. Kies eenvoudig de gewenste patroon en verlot om alle kleuren te laten zien. Terwijl alle knoppen actief blijven in deze modus, het is ideaal voor gebruik als een passieve ontspanningshulp in een kamer en voor die personen die niet in staat zijn om de knoppen te bedienen.

9. Onderhoud

Het diepte spiegel paneel is ontworpen om onderhoudsarm te zijn. Maak de buitenkant schoon als gewenst met een zachte vochtige doek.

10. Technische informatie

INGANG: 100-240V 50 / 60Hz, 1,5A

UITGANG: 12V 5A

Voeding goedkeuringen:

